



BALANÇA DIGITAL COM CONEXÃO BLUETOOTH

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo: 1440PS

3V  (2xAAA1.5V)

Faixa de frequência : 2402-2480 MHz

Potência máxima de radiofrequência
transmitida : -16 ~ 0dBm


Leia atentamente estas instruções antes da primeira
utilização do produto e guarde-as para futura consulta.



Fig. 1



Fig. 2

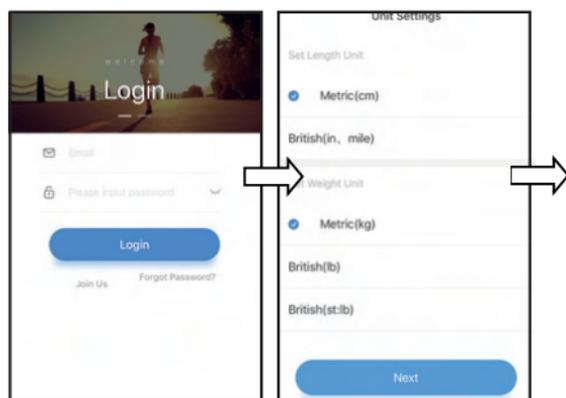

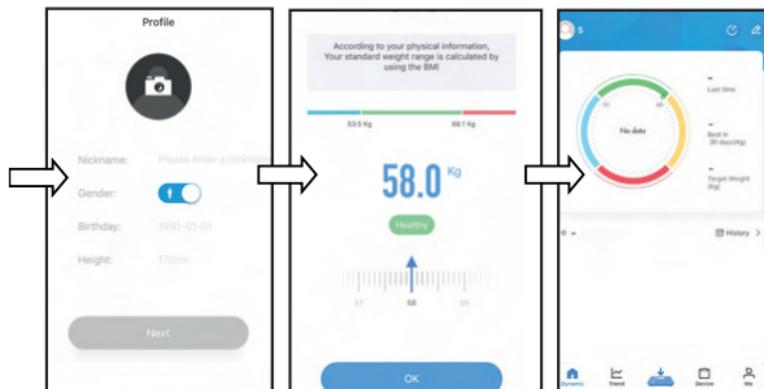


Fig. 3



Fig. 4



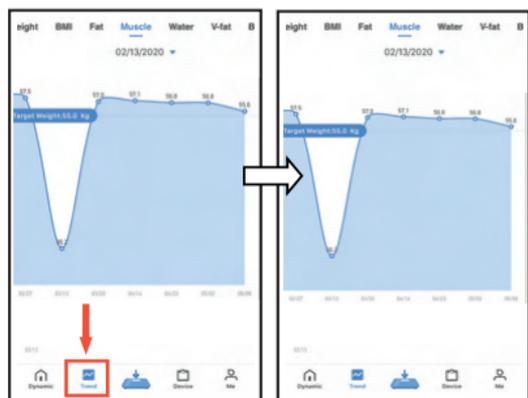


Fig. 5

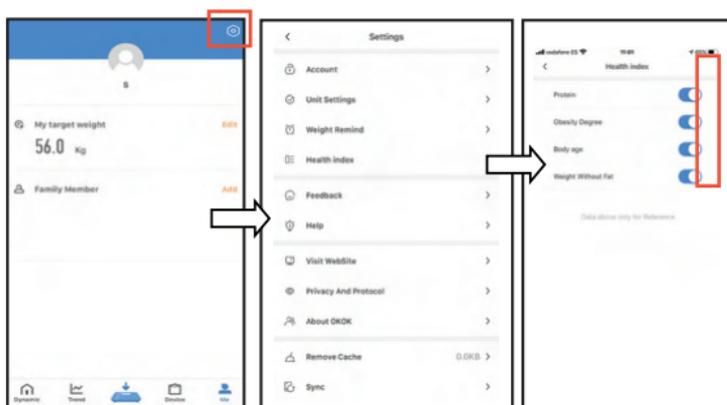

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

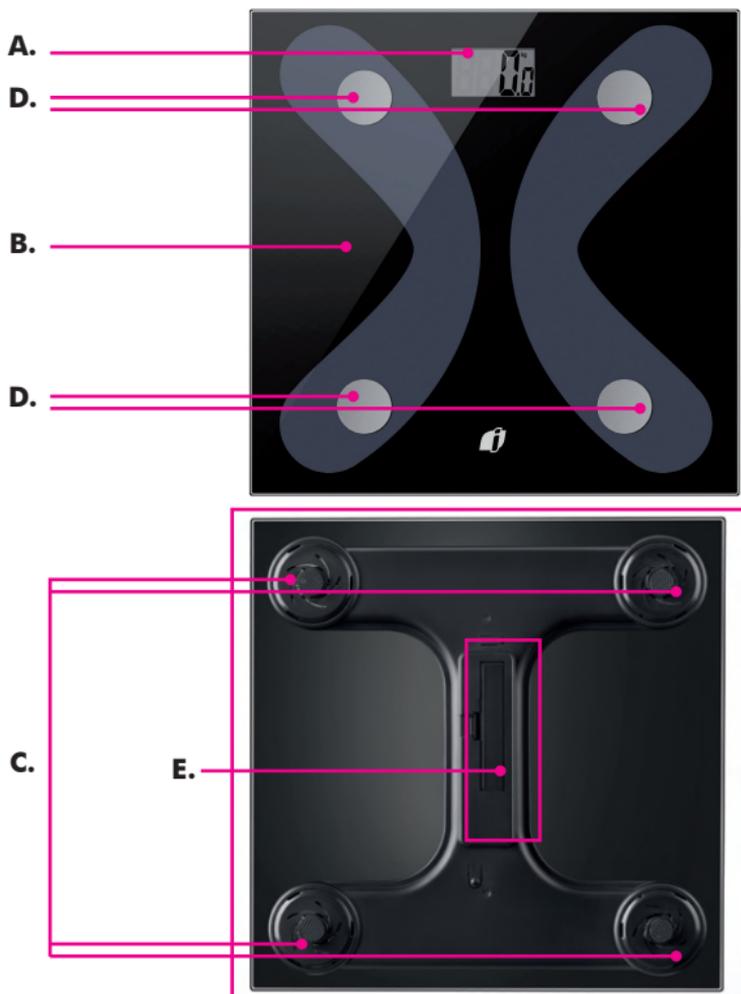

A. Ecrã LCD grande para uma fácil leitura.

B. Plataforma de vidro temperado de 6 mm. Elevada qualidade.

C. Pés antiderrapantes.

D. Sensores metálicos de medição, com 4 pontos de contacto para garantir a máxima precisão no momento de medir a gordura corporal, a proporção de água corporal, a massa muscular e a massa óssea.

E. Compartimento para as pilhas

BALANÇA COM CONEXÃO BLUETOOTH INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-O fabricante não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se ao local de aquisição, visto que a garantia

cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho

à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se estiverem sob vigilância ou lhes tiverem sido fornecidas instruções prévias relativas à utilização do aparelho em total segurança e após terem compreendidos os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Utilize o aparelho numa superfície lisa, horizontal e plana.

-Não coloque o aparelho sob tapetes, carpetes ou alcatifas, etc.

-Não deixe a balança cair ou embater contra outros materiais.

-Não suba à balança com os pés molhados,

poderá sujeitar-se a acidentes, nomeadamente quedas.

-A balança é um aparelho de precisão. Use-a com cuidado.

-Não coloque excesso de peso na superfície da balança (máx. 180 kg, aprox.). Caso contrário, o sensor poderá danificar-se.

-As pessoas com pacemaker e outros dispositivos elétricos ou eletrónicos não devem usar este dispositivo.

INSTRUÇÕES PARA O USO DE PILHAS

Retire as pilhas do compartimento se não for utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.

Recorde que as pilhas devem ser depositadas

em contentores especializados para recolha de pilhas.

Se quiser desfazer-se do produto, não se esqueça de retirar as pilhas do aparelho.

Se as pilhas tiverem algum tipo de fuga nunca as manipule diretamente com as mãos.

Troque as pilhas quando estas estiverem gastas.

Só se podem utilizar pilhas do mesmo modelo ou equivalente às recomendadas.

As pilhas devem ser colocadas de acordo com a polaridade indicada.

Nunca coloque o compartimento das pilhas perto de fontes de calor, não coloque a unidade de controlo ao sol.

Não misturar pilhas novas com pilhas já usadas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-Retire as pilhas da parte exterior da embalagem e coloque-as no seu compartimento.

-Para obter uma boa condutividade e um bom uso da balança, para garantir resultados corretos na medição da gordura corporal, da proporção da água corporal, da massa muscular, do peso corporal e da massa óssea, deve pesar-se descalço; para garantir a máxima precisão confirme que os seus pés estão em contacto com os 4 sensores metálicos.

-O excesso de líquidos, alguns medicamentos e/ou o ciclo menstrual podem afetar os resultados.

-Para medir o peso corporal não é necessário facilitar parâmetros pessoais. Porém, caso deseje a análise da composição corporal deverá indicar os dados pessoais.

-Na aplicação selecione as medidas que quer usar (kg., stones, lbs).

-Caso pretenda realizar a análise da composição corporal, terá de fazer o download da App e indicar os seus dados pessoais.

Por favor, faça o download da aplicação (APP) de acordo com o sistema do seu smartphone. A APP gratuita para o sistema IOS está disponível na APP STORE de "OKOK INTERNATIONAL". Para o sistema Android, no Google Play de "OKOK INTERNACIONAL", ou leia o código QR para fazer o download e proceder à instalação.

(Fig.1)

Leia o código QR para fazer o download e proceder à instalação (compatível com IOS e Android).

1. Uso (Fig.2)

1) Leia o código QR para fazer o download e instalar a app. O idioma pré-selecionado é o chinês, mas ao clicar no segundo botão pode fazer o download da versão em inglês. Posteriormente poderá fazer o download no seu smartphone.

2) Execute a app no seu

smartphone e ative a função Bluetooth.

3) Registe-se, coloque o seu correio eletrónico e palavra-chave. Depois digite os seus dados pessoais (nome, sexo, idade, altura) no menu de utilizador (USER).

2. Conectar o Bluetooth da balança (Fig.3)

Selecione "Configuração" ("Settings"), depois escolha "A minha balança" ("My scale").

Clique "Não associado" ("Unpaired") e ligue o Bluetooth selecionando "Associar Bluetooth balança" ("Pair Bluetooth scale").

Coloque-se descalço na balança.

Selecione "Associar" ("Pair") e peso/IMC/Gordura corporal (%) aparecerá no ecrã do seu telemóvel.

Clique no botão Fat (Fat) e no ecrã aparecerão oito funções: Peso/IMC/Gordura corporal (%)/Músculo (%)/Gordura visceral/Osso/Água/Calorias.

3. Dados registados (Fig.4)

O sistema registará os resultados sempre que se pesar. Desta forma poderá comprovar os resultados em qualquer momento. É

fácil de aceder ao histórico das pesagens e à curva de peso corporal. Selecione "Evolução" ("Trend") para confirmar a informação registada.

4. Ajustes de medidas (Fig.5)

Também pode seleccionar as medidas de comprimento (metros ou polegadas) e de peso (kg/lb/st:lb). Para o fazer, clique em "Configuração" ("Setting"), e depois "Ajustes medidas" ("Unit Settings").

Você também pode adicionar outros valores de medição, como: Proteína, Grau de Obesidade, Idade corporal e Peso sem Gordura.

PROBLEMAS E ERROS:

- "Err" :Acima do peso em escala.
- "Lo": A bateria está baixa (instalar- substituir novas baterias).
- "C": Escala Auto-Zero (aparece quando o peso está entre 1-3 Kg).
- "-Err": Retome o uso depois de retornar a zero.

ATENÇÃO:

1. Não se pese com meias para medir a gordura

corporal e a percentagem de hidratação. Neste caso, deve colocar-se sobre as placas metálicas descalço.

2.As mulheres grávidas e as pessoas com pacemakers não podem usar a balança.

3.Quando se pesar não coloque a balança numa superfície irregular, não pise as extremidades da balança e não a use com os pés molhados.



LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Não use produtos de limpeza abrasivos ou objetos que podem danificar o aparelho. Limpe a superfície com um pano húmido.

-Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

- NUNCA MERGULHE O APARELHO EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. NÃO O COLOQUE DEBAIXO DA TORNEIRA.

- Guarde o aparelho num lugar seguro.

DADOS TÉCNICOS

- Sistema de saúde para o telemóvel e balança.
- Tecnologia sem fios de Bluetooth.
- Compatível com iPhone e Ipod touch.
- Compatível com smartphones ou outros dispositivos inteligentes com o sistema operativo superior ao IOS 4.0 e Android versão 4.3.
- Dimensões do produto: 26 x 26 x 2,4cm.
- 8 utilizadores por cada telemóvel.
- 2 x AAA 1,5V.
- Plataforma de vidro temperado.
- Peso, Gordura Corporal, Percentagem de Água, Peso Óssea, Calorias, Percentagem muscular, IMC, Taxa de metabolismo basal, Proteína, Grau de obesidade (comparando o peso real e o peso do idela) Idade corporal (calculada com base no Metabolismo Basal), Peso Corporal Magro (LBM, peso sem gordura).
- Medidas: kg, lb, st:lb.
- Capacidade de peso máxima:

180KG / 396LB / 29STONE
- Capacidade de peso mínima: 3KG.
- Secções de peso: 100g/0.2 lb.

 Este produto está conforme as Directivas EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU e ROHS 2015/863/EU.

Para consulta da Declaração UE de Conformidade, aceda a <https://www.intermarche.pt/informacao-ao-consumidor/>

GARANTIA

1. Em caso de falta de conformidade do produto com o contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos.
2. Entende-se por falta de conformidade qualquer defeito de origem ou fabrico do produto (defeito existente à data da entrega do bem).
3. Este produto tem uma garantia de 3 (três) anos, contados a partir da data da compra pelo consumidor, e apenas para defeitos de origem ou de fabrico.
4. O 3.º ano de garantia só é aplicável se o consumidor conformidade/defeito do produto existia à data da compra ou entrega do bem.
5. A presente garantia não abrange danos causados por utilização negligente, uso

indevido, acidente, não cumprimento das instruções do fornecedor, modificação ou reparação não autorizada do aparelho, nem encargos com a manutenção e reparação do produto não decorrentes da aplicação da garantia.

6. A garantia só é válida se, aquando da denúncia da falta de conformidade do produto ao vendedor, o consumidor apresentar a fatura original da compra, devendo apresentar a caixa de origem e respetivos acessórios.

7. Para efeitos de utilização da presente garantia, o consumidor deverá entregar o produto no estabelecimento

8. Em caso de reparação do produto, e decorrido que esteja o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da comunicação do vendedor ao consumidor para levantar o mesmo, sem que este assim proceda, o vendedor dará ao produto o destino que entender, sem que daí possa decorrer qualquer direito de indemnização ou compensação para o consumidor.

9. A presente garantia é gratuita e decorre automaticamente da compra do produto.



RECICLAGEM
DO PRODUTO - MEIO
AMBIENTE

Os resíduos de produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos. Por favor entregue-os no ecocentro municipal mais próximo sempre que exista, ou nos Pontos de Recolha específicos para o efeito, nos locais de venda. Consulte as autoridades locais ou o seu vendedor para obter aconselhamento sobre o encaminhamento do resíduo. Este resíduo pode apresentar um perigo para o meio ambiente.